

Intuitivo. Flexible. Eficiente.

Un nuevo punto de referencia en la eficiencia del flujo de trabajo.



SOLUCIONES DE IMÁGENES MÉDICAS INTELIGENTES

Image Suite le brinda las ventajas que usted necesita.

El software Image Suite V4 ha establecido un nuevo punto de referencia para la eficiencia del flujo de trabajo en centros médicos pequeños. Obtenga las imágenes de alta calidad que necesita con un sistema que se adapta perfectamente.

Accesible.

Image Suite está diseñado para ahorrar dinero en consultorios privados y clínicas pequeñas, y ahora, con el módulo mini-PACS totalmente opcional, puede optar por agregar esta característica cuando la necesite.

Fácil de utilizar.

Nuestra interfaz de usuario de próxima generación hace que la operación sea más intuitiva que nunca. Sus técnicos adquirirán imágenes como profesionales en muy poco tiempo. Observe cómo su eficiencia y productividad se disparan.

Potente.

Este pequeño caballo de batalla ofrece procesamiento de imágenes automático, herramientas de edición avanzadas y capacidades de análisis de rechazo de imágenes. La entrada remota de órdenes y el acceso a PACS le permiten usar el sistema en todos sus centros médicos.

Flexible.

El sistema se puede personalizar fácilmente para satisfacer sus necesidades comerciales específicas. Obtenga las características que necesita ahora y agregue capacidades a medida que crece su consultorio.

Principales ventajas


- Diseñado para optimizar el flujo de trabajo en centros médicos más pequeños
- Ofrece una interfaz táctil intuitiva y fácil de usar
- Disponible con el módulo Mini-PACS de manera opcional
- Cuenta con un conjunto robusto de herramientas de mejora de imágenes

Compañeros perfectos.

Software Image Suite de CARESTREAM +
CR + sistemas de DR + impresoras láser



Programa

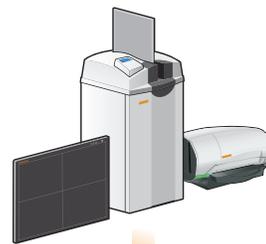

Adquiera



Vea/edite



Diagnostique/
informe



Imprima/archive

Programe

Acelere el proceso de registro, desde cualquier lugar.

- Registre a los pacientes de forma remota con un software basado en la Web.
- Los gráficos permiten tener una selección rápida y fácil de partes del cuerpo y vistas.
- Agregue nuevas partes del cuerpo y vistas, edite las existentes o aplique un procesamiento personalizado.
- Conéctese a los sistemas EMR/RIS compatibles con DICOM o HL7 para obtener un flujo de trabajo simplificado.

Adquiera

Capture imágenes de alta calidad de forma rápida y sencilla emparejando Image Suite con los sistemas de CR y DR de Carestream.

- Adquiera imágenes de hasta dos detectores DR o de Vita Flex CR y sistemas Classic CR.
- Disfrute una experiencia de usuario mejorada con la interfaz de usuario táctil fácil de usar y navegación sencilla.
- Las herramientas y aplicaciones clínicas incluyen enmascaramiento circular, histograma, análisis, valor de píxel del retorno de la inversión y más.
- Mejore la calidad de las imágenes y acelere el flujo de trabajo utilizando imágenes de posicionamiento de referencia y guías de imágenes de rayos X de muestra.
- Realice exámenes de mamografía con DIRECTVIEW Classic CR de CARESTREAM.
- Utilice la característica de análisis de rechazo de imágenes para llevar a cabo un seguimiento de los problemas con los exámenes.
- El modo de almacenamiento de imágenes le permite capturar hasta 200 imágenes en el detector mientras se encuentra alejado de la consola para luego cargarlas en el sistema una vez que haya salido del modo.

Vea/edite

Obtenga imágenes de alta calidad.

- Mejore el flujo de trabajo y la productividad con la pantalla de adquisición de imágenes simple y fácil de usar de Image Suite.
- Ajuste el procesamiento de imágenes con solo presionar un botón, utilizando barras deslizantes para ajustar el brillo, el contraste o los detalles desde la pantalla de adquisición.
- Utilícelo para tener hasta ocho sesiones simultáneas del visualizador web para aumentar la productividad.
- Utilice herramientas de medición especializadas para imágenes quiroprácticas, ortopédicas o mamográficas*.
- La unión automática (disponible solo en CR) y los editores de unión manual le permiten manipular y pegar imágenes individuales para crear con precisión la vista panorámica que necesita.
- Acceda a imágenes e informes de pacientes desde cualquier lugar en un iPad con Tablet Viewer.

*Las herramientas especializadas para mamografía no están disponibles en EE. UU. ni en Canadá.

Diagnostique/informe

Acelere los diagnósticos y mejore el cuidado de la salud para el paciente.

- Aumente la productividad viendo varias imágenes simultáneamente a través de la compatibilidad con dos monitores en clientes web.
- Reciba imágenes de CT, MR, ultrasonido y CR/DR adicionales con el software opcional SCP de DICOM Store.
- Genere/revise informes en varios clientes web en todos sus centros médicos.
- Realice pruebas de calidad del sistema con el software de la herramienta de calidad total de Image Suite.

Imprima/archive

Comparta y almacene imágenes de manera eficiente.

- Maximice la seguridad con copias de seguridad programadas o a demanda.
- Realice copias de seguridad en CD y USB extraíbles para almacenamiento sin conexión.
- Optimice la facilidad de uso de las imágenes con las herramientas de exportación JPEG o DICOM.
- Cree composiciones de impresión multiformato con capacidades de edición de imágenes independientes.

Mida/informe

Haga un seguimiento de las alteraciones con la herramienta de calidad total.

- Permite determinar rápidamente la funcionalidad de cada uno de sus detectores.
- Proporciona datos sobre la respuesta de sus detectores con el paso del tiempo para realizar un seguimiento de la MTF, la CNR y de las alteraciones de campo plano.
- Exporte datos a Excel a fin de hacer un seguimiento.
- Incluye un fantoma de campo plano y estuche portátil.

Rendimiento líder en el sector:

Conozca nuestra familia de detectores de DR.

Nuestra cartera de detectores de DR incluye modelos inalámbricos que se pueden compartir y fijar para satisfacer sus necesidades según el tipo de examen, el tamaño del detector, el nivel de dosificación y su presupuesto. Descubra el detector adecuado para sus necesidades en carestream.com/detectors.



Detectores de DR



Sistema Vita Flex CR



Software Image Suite V4



Impresora láser DRYVIEW 5700

NO IMPORTA EN QUÉ CAMINO SE ENCUENTRE,
LO LLEVAREMOS A DONDE
NECESITE LLEGAR.

SOLUCIONES DE IMÁGENES
MÉDICAS INTELIGENTES


La solución Image Suite.

Un sistema completo de gestión y adquisición de imágenes digitales.

Opciones disponibles para el software Image Suite/V4

- Software de informes clínicos
- Software de archivo de Mini-PACS
- Licencias del visualizador web: hasta 20
- Soportes de pared/cassettes de imágenes panorámicas
- Proveedor de clase de servicio (Service Class Provider, SCP) de DICOM Store
- Fantoma TQT
- Herramientas avanzadas de medición
- Software con característica para mamografía*
- Licencia para aumentar el tamaño de adquisición y almacenamiento
- Licencia de múltiples instancias de citas web
- Software Tablet-Viewer

*Las herramientas especializadas para mamografía no están disponibles en EE. UU. ni en Canadá.

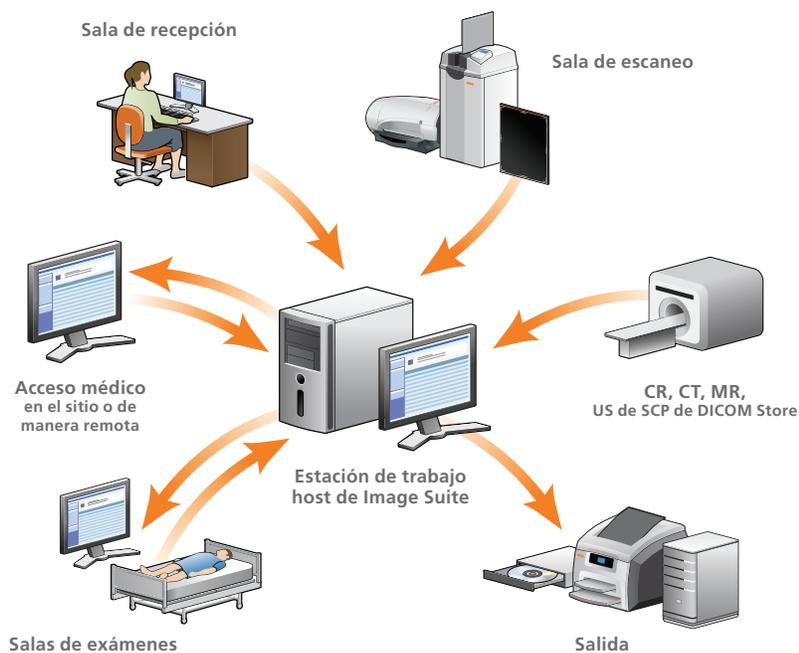

Imaging Software Powered by
Eclipse

Eclipse:
Aproveche la potencia
de décadas de innovación.

Eclipse de Carestream es el motor detrás de nuestro software innovador de imágenes médicas.

carestream.com



"Rx only"

© Carestream Health, Inc., 2023. CARESTREAM, DIRECTVIEW y DRYVIEW son marcas comerciales de Carestream Health. CAT 2000 102 01/24

Carestream