

Intuitif. Flexible. Efficace.

Une nouvelle référence en matière d'efficacité de la procédure de travail.



SOLUTIONS D'IMAGERIE INTELLIGENTE

Image Suite offre les avantages dont vous avez besoin.

Le logiciel Image Suite V4 constitue une nouvelle référence en matière d'efficacité de la procédure de travail dans les petites structures. Vous obtiendrez les images de haute qualité dont vous avez besoin grâce à un système parfaitement adapté.

Abordable.

Image Suite est conçu pour réduire les coûts des cabinets privés et des petites cliniques. Désormais, avec le module mini-PACS entièrement facultatif, vous avez le choix de pouvoir ajouter cette fonctionnalité lorsque vous en avez besoin.

Facile à utiliser.

Grâce à notre interface utilisateur de nouvelle génération, le fonctionnement est plus intuitif que jamais. Vos techniciens pourront acquérir des images comme des pros en un rien de temps. Vous verrez votre efficacité et votre productivité monter en flèche.

Puissant.

Ce stakhanoviste de l'imagerie vous fera bénéficier d'un traitement d'image automatique, d'outils d'édition sophistiqués et de capacités d'analyse de rejet d'image. La saisie des commandes à distance et l'accès à PACS vous permettront d'utiliser le système partout dans votre établissement.

Flexible.

Vous pourrez facilement personnaliser le système en fonction des besoins spécifiques de votre entreprise. Vous pouvez dès maintenant bénéficier des fonctionnalités dont vous avez besoin et en ajouter d'autres à mesure que votre cabinet se développe.

Aperçu des avantages


- Conçu pour optimiser la procédure de travail dans les petites structures
- Offre une interface tactile intuitive et facile à utiliser
- Disponible avec un module Mini-PACS en option
- Doté d'un ensemble robuste d'outils d'amélioration de l'image

Des compagnons parfaits.

Logiciel Image Suite CARESTREAM +
CR + radiologie numérique +
Imprimantes laser



Programmer

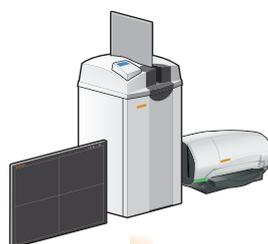

Acquérir



Voir/Modifier



Diagnostic/
Compte-rendu



Imprimer/Archiver

Programmer

Un processus d'enregistrement plus rapide, où que vous vous trouviez.

- Enregistrez les patients à distance via le logiciel en ligne.
- Sélectionnez rapidement et facilement les parties du corps et les vues grâce aux graphiques.
- Ajoutez ou modifiez des parties du corps et des vues, ou appliquez un traitement personnalisé.
- Connectez-vous avec des systèmes DICOM ou des systèmes EMR/RIS conformes au protocole HL7 pour simplifier la procédure de travail.

Acquérir

Des captures d'image de haute qualité, rapides et faciles en associant Image Suite aux systèmes Carestream de radiologie numérique et de RAO.

- Faites des acquisitions avec deux détecteurs de radiologie numérique au maximum ou avec des systèmes Vita Flex CR et Classic CR.
- Profitez d'une expérience utilisateur améliorée grâce à une interface utilisateur conviviale et simple à utiliser.
- Les outils et applications cliniques incluent le masquage circulaire, l'histogramme, l'analyse, la valeur de pixel ROI et plus encore.
- Améliorez la qualité des images et accélérez la procédure de travail en utilisant des images de positionnement de référence et des guides d'images radiographiques échantillons.
- Effectuez des examens de mammographie avec un système de RAO CARESTREAM DIRECTVIEW Classic.
- Utilisez la fonction d'analyse du rejet d'image pour faire le suivi des problèmes liés aux examens.
- Le mode Stockage d'images vous permet de capturer jusqu'à 200 images sur le détecteur lorsque vous êtes loin de la console, puis de les télécharger sur le système lorsque vous quittez ce mode.

Voir/Modifier

Obtenez des images de haute qualité.

- Améliorez votre procédure de travail et votre productivité avec l'écran d'acquisition d'images simple et facile à utiliser d'Image Suite.
- Ajustez le traitement d'image d'un clic, en utilisant les barres de défilement pour régler la luminosité, le contraste ou les détails de l'écran d'acquisition.
- Utilisez jusqu'à huit sessions Web Viewer simultanées pour une productivité accrue.
- Utilisez des outils de mesure spécialisés pour les images chiropratiques, orthopédiques ou mammographiques*.
- L'assemblage automatique permet de manipuler et de coller ensemble des images individuelles afin de créer avec précision la vue par reconstruction dont vous avez besoin.¹
- Où que vous vous trouviez, accédez aux images et aux rapports des patients sur un iPad grâce au Tablet Viewer.

* Outils spécialisés pour la mammographie non disponibles aux États-Unis et au Canada.

¹ Assemblage automatique de l'imagerie par reconstruction en option non disponible dans toutes les régions.

² Détecteurs Focus HD non disponibles dans toutes les régions.

Diagnostic/Compte-rendu

Des diagnostics plus rapides et des soins de qualité pour les patients.

- Augmentez votre productivité en visualisant simultanément plusieurs images grâce à la prise en charge de deux moniteurs sur les clients Web.
- Recevez des images de TDM, d'IRM, d'échographie et d'autres CR/DR avec le logiciel DICOM Store SCP en option.
- Créez/consultez des rapports sur plusieurs clients Web dans l'ensemble de votre établissement.
- Effectuez des tests de qualité système avec le logiciel Total Quality Tool d'Image Suite.

Impression/Archivage

Des outils efficaces de partage et de stockage d'images.

- Optimisez la sécurité grâce à la sauvegarde à la demande ou programmée.
- Effectuez des sauvegardes sur CD ou supports USB amovibles pour un stockage hors ligne.
- Optimisez la convivialité des images avec les outils d'exportation JPEG et DICOM.
- Créez des compositions d'impression multiformats avec des capacités d'édition d'images indépendantes.

Mesure/Rapport

Suivez les artefacts à l'aide de Total Quality Tool.

- Permet de déterminer rapidement chacune des fonctionnalités de votre détecteur.
- Fournit des données sur la réponse de votre détecteur sur la durée et vous permet de suivre les artefacts MTF, CNR et Flat-Field.
- Exportez les données dans Excel à des fins de suivi.
- Comprend un fantôme Flat-Field et une mallette de transport.

Performances de pointe : découvrez notre famille de détecteurs de radiologie numérique.

Notre portefeuille de détecteurs de radiologie numérique inclut des modèles sans fil, partageables et fixes pour satisfaire vos demandes basées sur le type d'examen, la taille du détecteur, la dose et le budget.

² Découvrez le détecteur adapté à vos besoins sur carestream.com/detectors.



Détecteurs de radiologie numérique



Système Vita Flex CR



Logiciel Image Suite V4



Imagerie laser DRYVIEW 5700

QUEL QUE SOIT VOTRE ITINÉRAIRE,
NOUS VOUS AMÈNERONS
À DESTINATION.

SOLUTIONS D'IMAGERIE INTELLIGENTE


La solution Image Suite.

Un système complet d'acquisition et de gestion d'images numériques.

Options disponibles pour le logiciel Image Suite/V4

- Logiciel de compte-rendu clinique
- Logiciel d'archivage Mini-PACS
- Licences Web Viewer – jusqu'à 20
- Cassettes d'imagerie par reconstruction/supports muraux
- DICOM Store Service Class Provider (SCP)
- TQT Phantom
- Outils de mesure sophistiqués
- Logiciel de fonction de mammographie*
- Licence pour augmenter la taille de stockage d'acquisition
- Licence multi-instance de rendez-vous Web
- Tablet-Viewer Software

* Outils spécialisés pour la mammographie non disponibles aux États-Unis et au Canada.

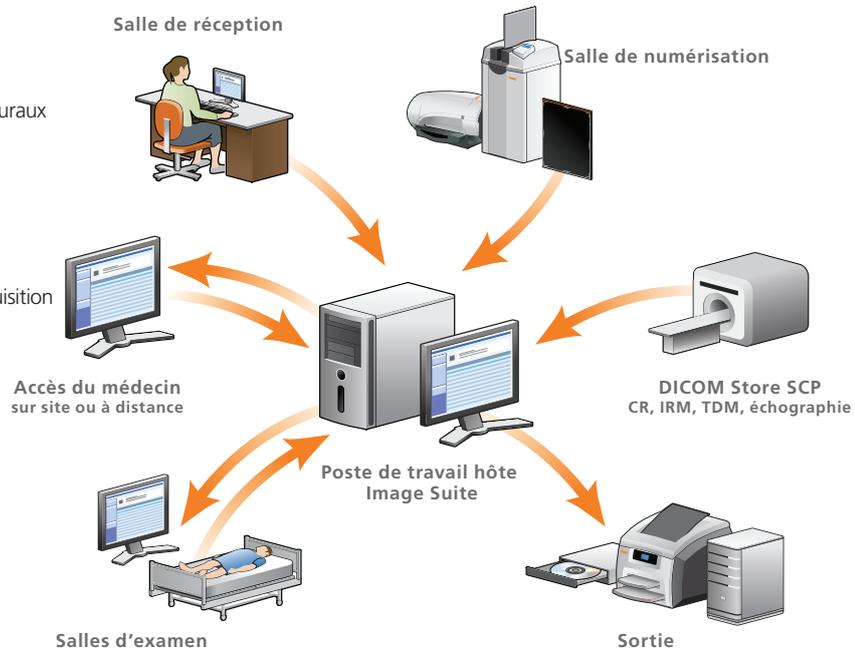

Eclipse :
utilisez la puissance de
décennies d'innovation.

Eclipse de Carestream est le moteur
de notre logiciel d'imagerie innovant.

carestream.com



"Rx only"

© Carestream Health, Inc., 2024. CARESTREAM, DIRECTVIEW et DRYVIEW sont des marques de commerce de Carestream Health. CAT 2000 102 04/24

Carestream