

# Intuitivo. Flexible. Eficiente.

Un nuevo estándar de referencia  
en la eficiencia del flujo de trabajo.



SOLUCIONES DE IMÁGENES MÉDICAS INTELIGENTES

## Image Suite le ofrece los beneficios que usted necesita.

El software Image Suite V4 ha establecido un nuevo estándar de referencia para la eficiencia en el flujo de trabajo en centros médicos más pequeños. Obtenga las imágenes de alta calidad que necesita con un sistema perfecto.

### Asequible.

Image Suite está diseñado para ahorrar dinero en las clínicas privadas y en los centros de salud más pequeños y ahora, con el módulo mini-PACS completamente opcional, usted puede elegir agregar esta característica cuando la necesite.

### Fácil de usar.

Nuestra interfaz de usuario de última generación hace que el funcionamiento sea más intuitivo que nunca. Sus tecnólogos adquirirán imágenes como profesionales en poco tiempo. Mire cómo se potencian su eficiencia y productividad.

### Potente.

Este pequeño y potente sistema ofrece un procesamiento de imágenes automático, herramientas de edición avanzadas y capacidades de análisis de rechazo de imágenes. La entrada remota de pedidos y el acceso a PACS le permiten usar el sistema en todo su centro médico.

### Flexible.

El sistema se puede personalizar de manera sencilla para satisfacer las necesidades específicas de la empresa. Obtenga las características que necesita ahora mismo y agregue capacidades a medida que su clínica crece.

### Principales ventajas


- Diseñado para optimizar el flujo de trabajo en centros médicos más pequeños
- Ofrece una interfaz táctil intuitiva y fácil de usar
- Disponible con módulo Mini-PACS opcional
- Cuenta con un conjunto de herramientas robustas para mejorar la imagen

## Imágenes guía perfectas.

Software Image Suite CARESTREAM +  
CR + Sistemas de DR + Impresoras láser



Programar

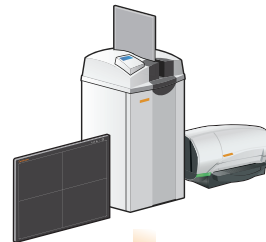

Adquirir



Ver/Editar



Diagnóstico/Informe



Imprimir/Archivar

## Programar

### Acelere el proceso de registro: desde cualquier lugar.

- Registre pacientes de manera remota con el software basado en la web.
- Los gráficos permiten una selección rápida y sencilla de las partes del cuerpo y las vistas.
- Agregue nuevas partes del cuerpo y vistas, edite las existentes o aplique un procesamiento personalizado.
- Conecte con sistemas EMR/RIS compatibles con DICOM o HL7 para un flujo de trabajo simplificado.

## Adquirir

### Capture imágenes de alta calidad de manera rápida y sencilla al vincular Image Suite con los sistemas CR y DR de Carestream.

- Adquiera imágenes de hasta dos detectores de DR o de los sistemas de Classic CR y Vita Flex CR.
- Aproveche una experiencia de usuario mejorada con la interfaz de usuario táctil fácil de usar y una navegación sencilla.
- Las aplicaciones y herramientas clínicas incluyen enmascaramiento de contorno circular, histograma, análisis, valor de píxel en la ROI y mucho más.
- Mejore la calidad de imagen y acelere el flujo de trabajo utilizando imágenes de posicionamiento de referencia y guías de imágenes de rayos X de muestra.
- Realice exámenes de mamografía con CARESTREAM DIRECTVIEW Classic CR.
- Utilice la característica de análisis de rechazo de imágenes para realizar un seguimiento de los problemas con los exámenes.
- El Modo de almacenamiento de imágenes le permite capturar hasta 200 imágenes en el detector mientras está lejos de la consola y luego cargarlas al sistema una vez que se sale de este modo.

## Ver/Editar

### Obtenga imágenes de alta calidad.

- Mejore el flujo de trabajo y la productividad con la pantalla de adquisición de imágenes simple y fácil de usar de Image Suite.
- Optimice el procesamiento de imágenes solo con un clic, con las barras de desplazamiento para ajustar el brillo, el contraste o los detalles desde la pantalla de adquisición.
- Utilice hasta ocho sesiones simultáneas de visualizador web para una mayor productividad.
- Utilice herramientas de medición especializadas para imágenes de mamografía\*, quiropráctica u ortopedia.
- El solapamiento automático le permite manipular y pegar imágenes individuales juntas para crear de manera precisa la vista panorámica que necesita.<sup>1</sup>
- Acceda a informes e imágenes de pacientes desde cualquier lugar en un iPad con el Visualizador de tableta.

\*Herramientas especializadas para mamografía no disponibles en EE. UU. y Canadá.

<sup>1</sup> El solapamiento automático de imágenes panorámicas opcional no está disponible en todas las regiones.

<sup>2</sup> Los detectores Focus HD no están disponibles en todas las regiones.

## Diagnóstico/Informe

### Acelere los diagnósticos y mejore la atención del paciente.

- Aumente la productividad visualizando varias imágenes simultáneamente a través del monitor doble de clientes web.
- Reciba imágenes de TC, RM, ultrasonido y CR/DR adicionales con software de SCP de almacenamiento DICOM.
- Genere/revise informes de varios clientes web de todo su centro médico.
- Realice pruebas de la calidad del sistema con el software de herramienta de calidad total de Image Suite.

## Imprimir/Archivar

### Comparta y almacene imágenes de manera eficiente.

- Maximice la seguridad con copias de seguridad a petición y programadas.
- Realice copias de seguridad en CD y unidades USB extraíbles para un almacenamiento fuera de línea.
- Optimice la facilidad de uso de las imágenes con herramientas para exportar archivos JPEG o DICOM.
- Cree composiciones de impresión multiformato con capacidades de edición de imágenes.

## Medir/Notificar


### Realice un seguimiento de las imperfecciones con la herramienta de calidad total.

- Permite determinar rápidamente la funcionalidad de cada uno de sus detectores.
- Proporciona datos sobre la respuesta de sus detectores con el paso del tiempo para hacer un seguimiento de las imperfecciones de MTF, CNR y campo plano.
- Exporte datos en Excel para realizar un seguimiento.
- Incluye fantoma de campo plano y estuche portátil.


### Líder del sector en el desempeño:

### Conozca nuestra familia de detectores de DR.

Nuestro catálogo de detectores de DR incluye modelos inalámbricos, los que se pueden compartir y fijar para satisfacer sus necesidades según el tipo de examen, el tamaño del detector, el nivel de dosificación y el presupuesto.<sup>2</sup> Descubra cuál es el detector más adecuado para satisfacer sus necesidades en [carestream.com/detectors](http://carestream.com/detectors).

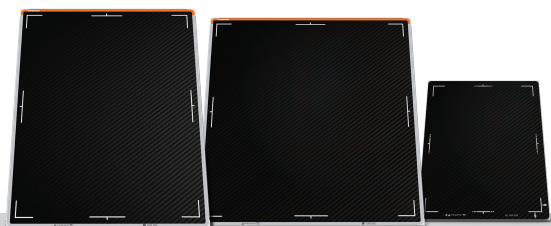

Detectores de DR

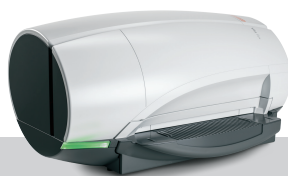

Sistema Vita Flex CR



Software Image Suite V4



Impresora láser DRYVIEW 5700



NO IMPORTA DÓNDE ESTÉ,  
LE LLEVAREMOS  
AL LUGAR QUE DESEE.

SOLUCIONES DE IMÁGENES  
MÉDICAS INTELIGENTES


## Solución Image Suite.

Un sistema completo de gestión y adquisición de imágenes digitales.

### Opciones disponibles para el software Image Suite/V4

- Software para la elaboración de informes clínicos
- Software de archivado de Mini-PACS
- Licencias de visualizador web: hasta 20
- Soportes de pared/cassettes de imágenes panorámicas
- Proveedor de clase de servicio (SCP) de almacenamiento DICOM
- Fantoma de TQT
- Herramientas de medición avanzadas
- Software de característica de mamografía\*
- Licencia para aumentar el tamaño de almacenamiento-adquisición
- Licencia para varias instancias de citas en línea
- Software de visualizador en tableta

\*Herramientas especializadas para mamografía no disponibles en EE. UU. y Canadá.

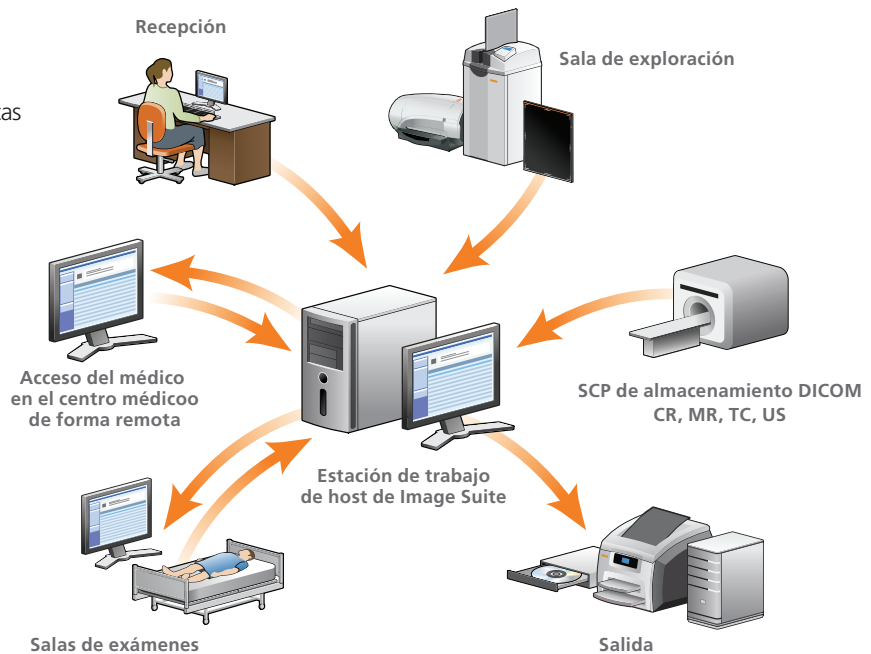

**Eclipse:**  
Aproveche las ventajas  
de décadas de innovación.  
El motor Eclipse de Carestream  
impulsa nuestro software innovador  
de imágenes médicas.

[carestream.com](http://carestream.com)



"Rx only"

© Carestream Health, Inc., 2024. CARESTREAM, DIRECTVIEW y DRYVIEW son marcas comerciales de Carestream Health. CAT 2000 102 04/24

**Carestream**