

Compacto. Leve. Versátil.

SMART IMAGING SOLUTIONS

Melhor desempenho. Menor tamanho.


O sistema CARESTREAM DRX-1 lançou o poderoso X-Factor, com o primeiro detector do mundo wireless do tamanho de um cassete convencional. Sua moderna plataforma possibilitou que um único detector DRX funcione perfeitamente com toda a família de produtos DRX. Logo em seguida, lançamos o detector DRX de segunda geração, um detector mais leve e mais rápido com recursos aprimorados.

Agora, chega o mais novo detector de menor formato que está em conformidade com os padrões ISO 4090 e oferece maior flexibilidade de posicionamento, principalmente em berços.

Resumo das vantagens

O detector CARESTREAM DRX Plus 2530C oferece:

- X-Factor Thinking - permite compartilhar o detector com toda a nossa família de produtos DRX.
- Design mais compacto para rápida e fácil colocação em bandejas de incubadoras pediátricas.
- Modelo com iodeto de cério (CsI) para aplicações pediátricas sensíveis à dose.
- Posicionamento flexível e fácil manuseio, o que o torna ideal para imagens ortopédicas em mesa.
- Compartilhamento com toda a família de produtos DRX.
- Menor distância entre pixels para uma melhor qualidade de imagem e melhor confiança no diagnóstico.

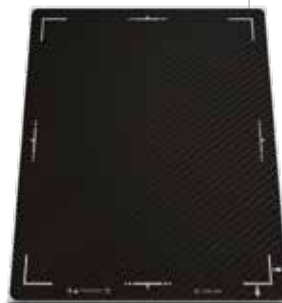

Detector CARESTREAM DRX Plus 2530C



Benefícios adicionais do detector:


- Desempenho wireless, eliminando as dificuldades e os transtornos causados pelos cabos, fios, além de reduzir o risco de infecção.
- Desempenho rápido e acesso instantâneo a imagens.
- Compatível com o carregador de bateria do detector CARESTREAM DRX-1, ajudando a eliminar equipamentos adicionais.
- Adaptável - encaixa facilmente na caixa do detector CARESTREAM DRX-Revolution e na gaveta do sistema móvel de detectores de raios X CARESTREAM DRX Revolution Nano.

Proteção contra imprevistos

O DRX Plus 2530C é elegível para o Plano Smart Detector de Proteção Contra Acidentes da CARESTREAM DRX. Este plano foi desenvolvido sob medida e pode ser adicionado à sua Garantia Carestream DRX padrão ou ao seu Contrato de Serviço. O plano ajudará você a substituir seu detector DRX 2530 a uma fração do preço total, caso ocorra algum dano devido a um acidente no decorrer normal do uso clínico. Para você, isso significa maior confiança e tranquilidade, resolução do problema com apenas uma ligação, com substituição rápida para maximizar o seu fluxo de trabalho.

Especificações do DRX Plus 2530C:

Padrão wireless: 802.11AC
Tamanho da imagem: 25 x 30 cm
Distância entre pixels: 0,098 mm
Dimensões externas:
28,2 x 33,2 x 1,5 cm (11,1 x 13,1 x 0,59 pol.)

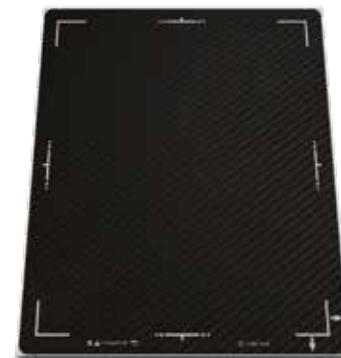

Desempenho líder de mercado: Conheça nossa linha de detectores DRX.

Nossa linha de detectores DR inclui modelos wireless, compartilháveis e fixos para atender às suas demandas com base no tipo de exame, tamanho do detector, nível de dosagem e seu orçamento.

Descubra o detector certo para as suas necessidades em carestream.com/detectors.

carestream.com/detectors



"Rx only"

© Carestream Health, Inc., 2019. CARESTREAM é marca registrada da Carestream Health. CAT 2000 253 04/19 | Registro: 803 787 50058

Carestream